


SOLUÇÕES PARA
**MALFORMAÇÃO
ARTERIOVENOSA**
MICROCATETERES
DIRECIONADOS
POR FLUXO
APOLLO™ E MARATHON™
RESULTADOS
COMPROVADOS

Microcateter
Apollo™



Microcateter
Marathon™

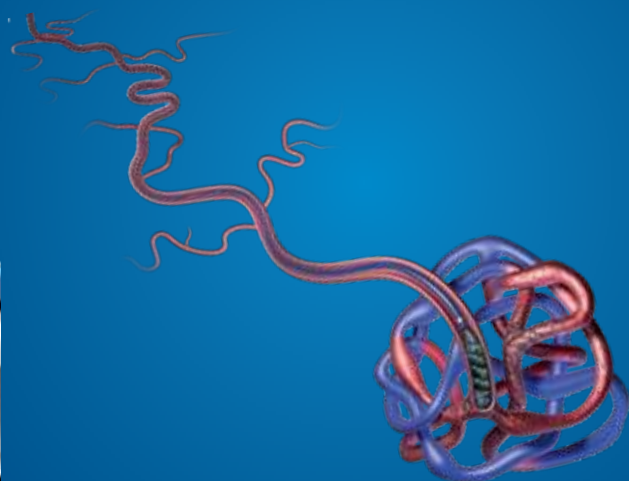

MICROCATETER MARATHON™

CAPACIDADE DE EMPUXE PROXIMAL

- Reforço de molas de aço inoxidável no eixo proximal

SEGMENTO DISTAL MACIO

- Durômetro variável para uma transição distal suave

REFORÇO ROBUSTO

- Reforço de malha de nitinol no seguimento distal


REVESTIMENTO LUBRIFICANTE (PTFE) INTERNO - DO HUB ATÉ A PONTA

- Para excelente interação de fio-guia

PERFIL DE RUPTURA INIGUALÁVEL

- Maior força de ruptura durante angiografia super-seletiva e entrega de material embólico


DIÂMETRO DE DOBRA*

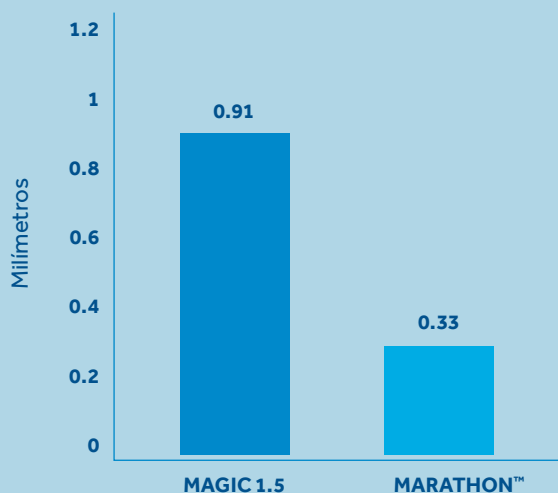

Marathon™ executa um apertado diâmetro de dobra - que auxilia na manutenção de um lúmen distal patente na anatomia complexa.

* Dados em arquivo.

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DISTAL**

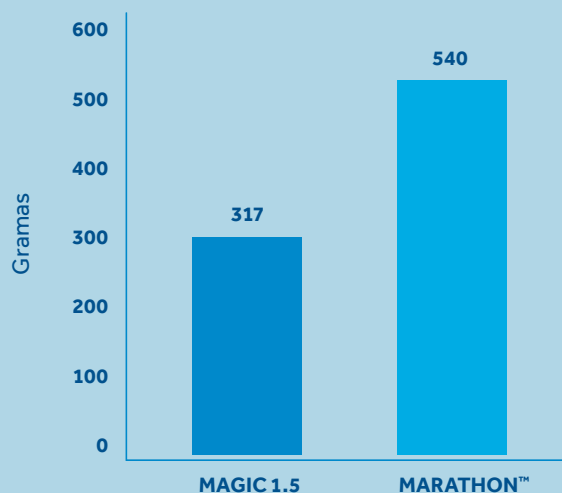

A malha do Marathon™ fornece resistência à tração significativa para excelente recuperação do cateter.

** Força aplicada até a separação do cateter.

COMPATIBILIDADE COMPLETA COM O SISTEMA LÍQUIDO EMBOLICO ONYX™

Os Cateteres direcionados por fluxo Apollo™ e Marathon™ foram expressamente projetados para complementar e melhorar a embolização com Onyx™ LES 18 e 34.

Juntas, essas ferramentas sinérgicas ajudam você a viajar para locais mais tortuosos, embolizar lesões mais desafiadoras e retornar com confiança.



INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Microcateter Apollo™

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO DISTAL (FR)	DIÂMETRO PROXIMAL (FR)	DIÂMETRO INTERNO (IN)	COMP. TOTAL (CM)	COMP. DA PONTA (CM)	FORMA DA PONTA	COMPATIBILIDADE DE FIOS (IN)
105-5095-000	1.5	2.7	0.013	165	1.5	Recto	≤ 0.01
105-5096-000	1.5	2.7	0.013	165	3	Recto	≤ 0.01
105-5097-000	1.5	2.7	0.013	165	5	Recto	≤ 0.01

Microcateter Marathon™

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO (FR)	DIÂMETRO INTERNO	COMP. TOTAL (CM)	COMP. UTILIZÁVEL (CM)	COMP. DISTAL (CM)	FIO GUIA MÁXIMO (IN)
105-5056	2.7-1.5	0.013	170	165	25	0.01

PRODUTOS COMPATÍVEIS

Microguia Mirage™ 0.008"

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO (EN)	COMP. TOTAL (CM)	COMP. DO COIL (CM)
103-0608	0.008	200	10

Sistema Líquido Embólico Onyx™

CÓDIGO DO PRODUTO	FORMULAÇÃO ONYX™
105-7000-060	Onyx™ 18

INDICAÇÕES: O Agente Líquido Embólico Onyx™ é indicado para a embolização de lesões no sistema neurovascular e vascular periférico, incluindo má formação arteriovenosa e hipervascular. O mixer é um acessório do agente embólico líquido Onyx™ que permite a suspensão adequada do tântalo para uma melhor visualização antes do uso. O fio guia hidrofílico Mirage™ é indicado para uso intravascular geral para auxiliar no posicionamento seletivo dos cateteres no sistema vascular periférico, visceral e cerebral durante procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos. O microcateter de aplicação Apollo™ Onyx™ é indicado para acessar o sistema neurovascular para a infusão seletiva e controlada do terapêutico especificado pelo médico, como materiais de embolização e materiais diagnósticos, como meio de contraste.

Registros ANVISA:

Onyx™ Agente Embolizante - 10349000454

Microcateter de Aplicação De Onyx™ Apollo - 10349000449

Microcateter Marathon™ Sem Estilete - 10349000574

Fio-Guia Hidrofílico Mirage™ - 10349000453

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
Cidade Monções, São Paulo - SP
CEP 04576-010, Brasil

Telefone: +55 11 2182-9200