



90%
**MENOS ACÚMULO
DE TROMBOS**

**COMPARADO A CATETERES
NÃO REVESTIDOS**

(com base na
contagem de plaquetas)¹




DuraMax® Cateter de Hemodiálise

Redução do Acúmulo de Trombos, In Vitro[†]

O Cateter BioFlo™ DuraMax® é o primeiro cateter de diálise com Tecnologia Endexo®, oferecendo um material de cateter mais resistente ao acúmulo de trombos in vitro, quando comparado a cateteres comumente utilizados (com base na contagem de plaquetas).[†]

O Cateter BioFlo™ DuraMax® fornece acesso de longo prazo ao sistema venoso periférico para sessões de hemodiálise. O Cateter BioFlo™ DuraMax® apresenta a Tecnologia Endexo®, presente em todo o trajeto do sangue, incluindo as superfícies intraluminal e extraluminal do cateter.

- O cateter de diálise BioFlo™ DuraMax® apresenta 84% menos acúmulo de trombos em sua superfície in vitro em comparação com cateteres de diálise crônica Palindrome não revestidos (com base na contagem de plaquetas).[†]
- O Cateter Bioflo™ DuraMax® é o primeiro cateter com a tecnologia Endexo®, presente em toda a superfície do cateter, intraluminal e extraluminal.

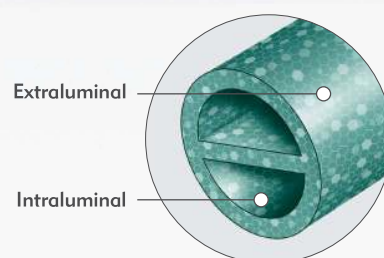

Bioflo™ DuraMax® vs. Cateter de Diálise Crônica Concorrente (sem cobertura)

Cateter Bioflo™ DuraMax® com tecnologia Endexo®

Mínima presença visível de trombos, bainha de fibrina ou coágulos.



Microscopia Eletrônica (aumentada 10x).

Cateter de Diálise Crônica (concorrente sem cobertura)



Microscopia Eletrônica (aumentada 10x).

Cateter BioFlo™ DuraMax® com Tecnologia Endexo®

83.5%
MENOS ACÚMULO DE TROMBOS

Comparado ao Cateter de Diálise Crônica Palindrome H

(com base na contagem de plaquetas)[†]

[†]A redução no acúmulo de trombos (com base na contagem de plaquetas) é sustentada por testes agudos in vitro realizados em bancada por até duas horas utilizando sangue bovino. Avaliações pré-clínicas in vitro não necessariamente predizem o desempenho clínico em relação à formação de trombos. Dados arquivados.

Cateter BioFlo™ DuraMax®

Luer de poliuretano termoplástico

Combinam resistência, estabilidade dimensional e resistência química.

Curved Tip Catheter

TECHNOLOGY

Tecnologia de cateter com ponta curva

Reduz o atrito à parede da veia e o risco de insuficiência arterial. O escalonamento da ponta em 3 cm reduz as taxas de recirculação.

Cateter BioFlo™ DuraMax® 15,5F

Facilita altas taxas de fluxo com pressões arteriais moderadas. Lúmen patenteado com design resistente a dobras.

Design patenteado com ponta venosa angulada e lúmen do fio-guia.

Posiciona o fio-guia no centro da borda anterior da ponta distal, proporcionando desempenho sobre o fio e facilidade de inserção.

Tubos de extensão transparentes

Para visualização precoce do retorno sanguíneo.

O Cateter BioFlo™ DuraMax® possui recursos avançados, como grandes diâmetros de lúmen e tecnologia Endexo® para redução de trombos, permitindo altas taxas de fluxo com pressões moderadas.

Pressão Média vs. Taxa de Fluxo

Comprimento	Pressão no Fluxo (mm Hg)					
	200 ml/mn		300 ml/min		400 ml/min	
	A	V	A	V	A	V
24 cm	-53	54	-73	84	-120	128
28 cm	-59	59	-86	90	-135	134
32 cm	-60	64	-92	97	-144	143
40 cm	-66	72	-107	108	-164	157
55 cm	-83	86	-133	127	-197	179

Dados arquivados.

CATETER BIOFLO™
DURAMAX®

30.3%
DE REDUÇÃO DE PRESSÃO

Comparado ao cateter de diálise crônica Palíndrome™

Ofertas competitivas de kits para atendimento ao paciente

Os cateteres BioFlo™ DuraMax® estão disponíveis em diversas opções para um procedimento seguro e confiável.

REFERÊNCIAS

Código	Comp. do cateter	Do cuff a ponta
--------	------------------	-----------------

KIT BÁSICO COM INTRODUTOR VALVULA ÚNICA

H965103038011†	20 cm	15 cm
H965103038021	22 cm	17 cm
H965103038031	24 cm	19 cm
H965103038041	28 cm	23 cm
H965103038051	32 cm	27 cm
H965103038061	36 cm	31 cm
H965103038070*	40 cm	35 cm
H965103038080*	48 cm	43 cm
H965103038090*	55 cm	50 cm

AS CONFIGURAÇÕES DO KIT INCLUEM:


KIT BÁSICO

- 1 Cateter de Hemodiálise BioFlo™ DuraMax®
- 2 Tampas de injeção
- 1 Curativo adesivo
- 1 Introduutor destacável valvulado 16F (única)
- 1 Dilatador vascular 12F
- 1 Dilatador vascular 14F
- 1 Tunelizador Tri-Ball com manga
- 1 Fio-guia J/Flex 0,038"
- 1 Agulha introdutora 18G x 2¾"
- 1 Bisturi de segurança lâmina nº 11

ANVISA: 80740950181

Este produto é feito sob encomenda | Embalagem individual com 1 unidade por caixa.
5 unidades por caixa. | *1 unidade por caixa.

Medição do comprimento do cateter (desenhado sem escala)

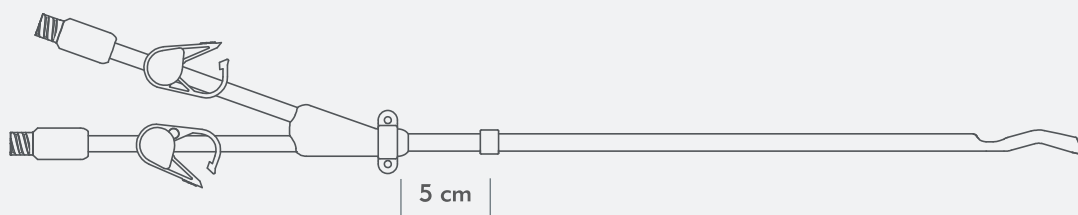

Antes de usar, consulte as Instruções de Uso para obter informações sobre indicações, contraindicações, advertências, precauções e modo de utilização.