

Sistema de Stent Periférico Autoexpansível **EverFlex™**

Comprimento do Cateter		Tamanho do Stent		Compatibilidade			
80 cm Número no catálogo de produtos	120 cm Número no catálogo de produtos	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Bainha de introdução recomendada (F)	Fio-guia (pol)	Tamanho recomendado do lúmen (mm)	Perfil de cruzamento (pol)
PRP35-05-020-080	PRP35-05-020-120	5	20	6	0,035	3,5-4,5	0,079
PRP35-05-030-080	PRP35-05-030-120	5	30	6	0,035	3,5-4,5	0,079
PRP35-05-040-080	PRP35-05-040-120	5	40	6	0,035	3,5-4,5	0,079
PRP35-05-060-080	PRP35-05-060-120	5	60	6	0,035	3,5-4,5	0,079
PRP35-05-080-080	PRP35-05-080-120	5	80	6	0,035	3,5-4,5	0,079
PRP35-05-100-080	PRP35-05-100-120	5	100	6	0,035	3,5-4,5	0,079
PRP35-05-120-080	PRP35-05-120-120	5	120	6	0,035	3,5-4,5	0,079
PRP35-05-150-080	PRP35-05-150-120	5	150	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-06-020-080	PRP35-06-020-120	6	20	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-06-030-080	PRP35-06-030-120	6	30	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-06-040-080	PRP35-06-040-120	6	40	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-06-060-080	PRP35-06-060-120	6	60	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-06-080-080	PRP35-06-080-120	6	80	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-06-100-080	PRP35-06-100-120	6	100	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-06-120-080	PRP35-06-120-120	6	120	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-06-150-080	PRP35-06-150-120	6	150	6	0,035	4,5-5,5	0,079
	PRP-35DR-06-200-120	6	200	6	0,035	4,5-5,5	0,079
PRP35-07-020-080	PRP35-07-020-120	7	20	6	0,035	5,5-6,5	0,079
PRP35-07-030-080	PRP35-07-030-120	7	30	6	0,035	5,5-6,5	0,079
PRP35-07-040-080	PRP35-07-040-120	7	40	6	0,035	5,5-6,5	0,079
PRP35-07-060-080	PRP35-07-060-120	7	60	6	0,035	5,5-6,5	0,079
PRP35-07-080-080	PRP35-07-080-120	7	80	6	0,035	5,5-6,5	0,079
PRP35-07-100-080	PRP35-07-100-120	7	100	6	0,035	5,5-6,5	0,079
PRP35-07-120-080	PRP35-07-120-120	7	120	6	0,035	5,5-6,5	0,079
PRP35-07-150-080	PRP35-07-150-120	7	150	6	0,035	5,5-6,5	0,079
	PRP-35DR-07-200-120	7	200	6	0,035	5,5-6,5	0,079
PRP35-08-020-080	PRP35-08-020-120	8	20	6	0,035	6,5-7,5	0,079
PRP35-08-030-080	PRP35-08-030-120	8	30	6	0,035	6,5-7,5	0,079
PRP35-08-040-080	PRP35-08-040-120	8	40	6	0,035	6,5-7,5	0,079
PRP35-08-060-080	PRP35-08-060-120	8	60	6	0,035	6,5-7,5	0,079
PRP35-08-080-080	PRP35-08-080-120	8	80	6	0,035	6,5-7,5	0,079
PRP35-08-100-080	PRP35-08-100-120	8	100	6	0,035	6,5-7,5	0,079
PRP35-08-120-080	PRP35-08-120-120	8	120	6	0,035	6,5-7,5	0,079
PRP35-08-150-080	PRP35-08-150-120	8	150	6	0,035	6,5-7,5	0,079
	PRP-35DR-08-200-120	8	200	6	0,035	6,5-7,5	0,079

Indicação: O Sistema de Stent Periférico Autoexpansível EverFlex™ destina-se a aumentar o diâmetro luminal no tratamento de lesões de novo ou reestenóticas sintomáticas, com até 180 mm de comprimento na Artéria Femoral Superficial (AFS) nativa e/ou nas artérias poplíteas proximais, com diâmetros vasculares de referência de 4,5 a 7,5 mm.

Contraindicações: O uso do Sistema de Stent Periférico Autoexpansível EverFlex™ é contraindicado para pacientes com histórico de hipersensibilidade ao níquel, pacientes contraindicados para terapia anticoagulante e/ou antiplaquetária e pacientes com lesões que impeçam a inflação total de um balão de angioplastia ou a colocação apropriada do stent ou do sistema de implantação de stent.

Eventos adversos potenciais: Os eventos adversos potenciais que podem estar associados ao uso de um *stent* na AFS e nas artérias poplíteas proximais incluem, mas não se limitam à reação alérgica, amputação, dissecação/perfuração arterial, distúrbios de coagulação (incluindo GI, linfáticos), infecção (local ou sistêmica, incluindo bacteremia ou septicemia), pseudoaneurisma, reestenose, trombose vascular/no *stent* e intervenção cirúrgica ou endovascular.

Consulte as instruções de uso fornecidas com o produto para ver uma lista completa de avisos, precauções, eventos adversos e informações sobre o dispositivo.



EverFlex™

Sistema de Stent Periférico Autoexpansível

Proporciona excelente flexibilidade tridimensional, com uma melhor conformidade na parede da artéria.

- Flexibilidade
- Durabilidade comprovada
- Evidência Clínica
- Alta Precisão
- Stents de até 200 mm

Tel.: 11 2187-6200
Fax: 11 2187-6375

www.covidien.com
atendimento.brasil@covidien.com



Precisão

O Sistema de Liberação EX.P.R.T. garante uma liberação apropriada, impedindo a liberação inadequada (“jumping”).

Os marcadores GPS de tântalo melhoram a visibilidade, possibilitando o posicionamento preciso.



Agora indicado para colocação na AFS e em lesões mais longas

O Sistema de Stent Periférico Autoexpansível EverFlex™ agora é indicado para colocação na Artéria Femoral Superficial (AFS) e/ou nas artérias poplíteas proximais. Esse sistema de stent de AFS, resistente à fadiga e clinicamente comprovado, agora oferece opções de stents ainda mais longos, minimizando a necessidade de stents múltiplos ou de sobreposição de stents durante a colocação na AFS.

O Stent Autoexpansível EverFlex™ demonstrou a sua segurança e eficácia no estudo clínico DURABILITY II. Esse estudo é o primeiro estudo controlado, focado em lesões grandes (até 18 cm), e tem por objetivo demonstrar especificamente o rendimento de somente um stent de 200 mm de comprimento na Artéria Femoral Superficial (AFS).

O estudo recrutou 287 pacientes com lesões altamente calcificadas, grandes e complexas.

- O comprimento médio da lesão com estenose é de 89,1 mm.
- 46,2% dos pacientes receberam stents ≥ 150 mm.
- 95% dos pacientes receberam somente um stent.

Resultados-chaves do estudo DURABILITY II


Uma taxa de patência primária do stent demonstrada com 1 ano por meio da análise de Kaplan-Meier de 77,2%:¹

- 86,2% em lesões ≤ 80 mm.
- 69,2% em lesões ≥ 80 mm.

Taxa de fratura do stent com 1 ano de 0,4%.

Referência: 1. Data on file DURABILITY II IDE Study, 287 subjects enrolled.


Um stent.

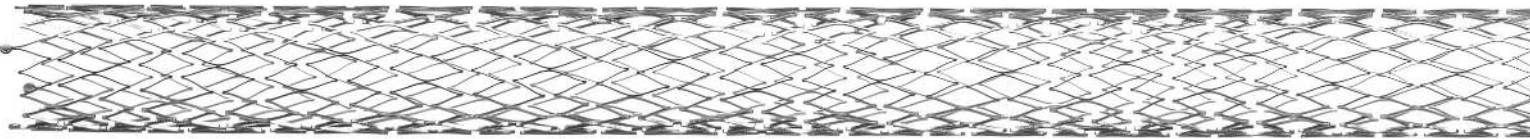


Indo muito além para oferecer mais opções de stents

Seja qual for o comprimento da lesão, o stent EverFlex™ oferece várias opções para os pacientes com Doença Arterial Periférica (DAP). Os diversos tamanhos, todos implantáveis por meio de um cateter 6 F, permitem o ajuste mais apropriado, com um só stent.

Uma escolha

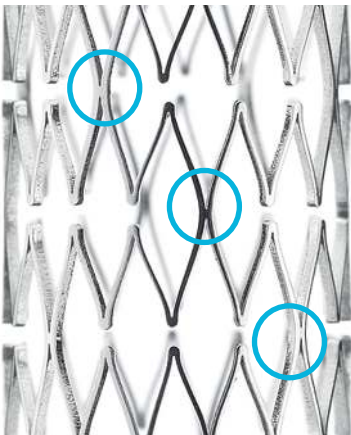


Conexão das células em espiral

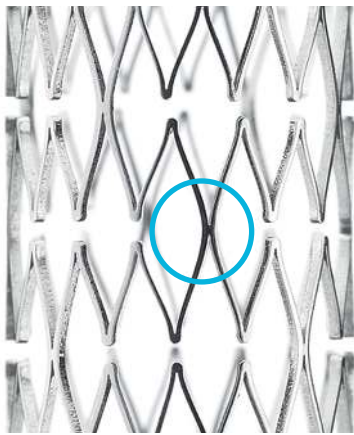

Conexão ponto a ponto

Projetados para distribuir a força de maneira uniforme.

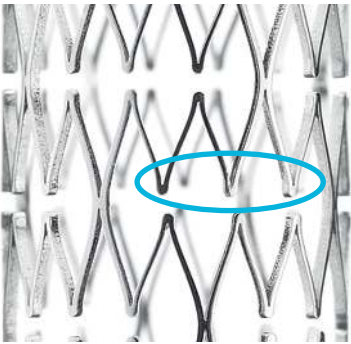

Design de ponto com três ondas

Resistente à compressão e proporciona um excelente posicionamento na parede.