



SOLUÇÕES PARA
TRATAMENTO
DE ANEURISMAS
PHENOM™*
CATETER
RESULTADOS
COMPROVADOS

Família de cateter Phenom™*

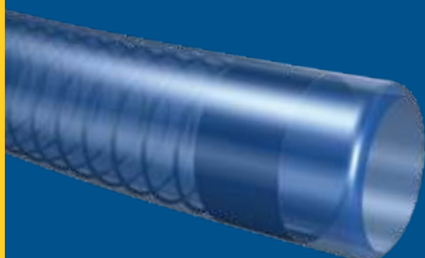

.045

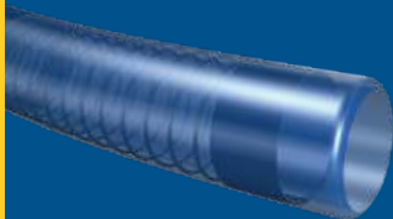


.017

.021

.027

DESIGN COMPATÍVEL¹.

ENTREGA EXCEPCIONAL A
CADA CURVA.

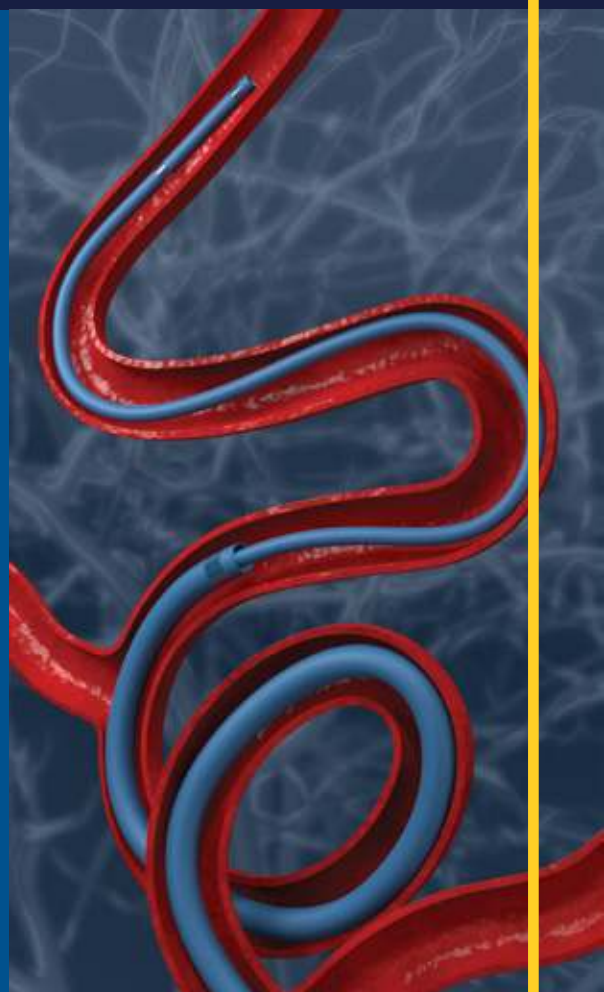

UMA FAMÍLIA COMPLETA DE CATETERES DESENVOLVIDOS ESPECIFICAMENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS.

BENEFÍCIOS¹

Lúmen interno projetado para evitar a ovalização e entregar os dispositivos com o mínimo de fricção.

A haste composta oferece capacidade de inserção superior.


Plataforma definitiva para a implantação de molas e de stent.

Haste Proximal Trançada Dupla¹

Eixo com flexibilidade progressiva¹


Perfil de Rigidez do 017³


Rigidez medida do Cateter Flexural [EI]
Comparação do Phenom™ 017 - Comprimento³

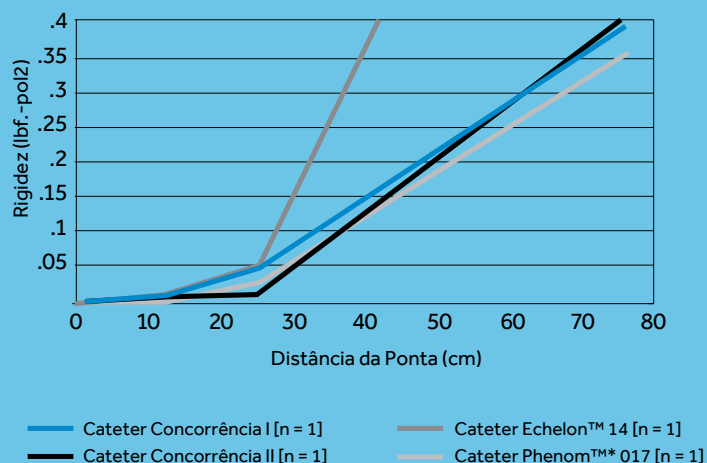

Perfil de Rigidez do 021³

Rigidez medida do Cateter Flexural [EI]
Comparação do Phenom™ 021 - Comprimento

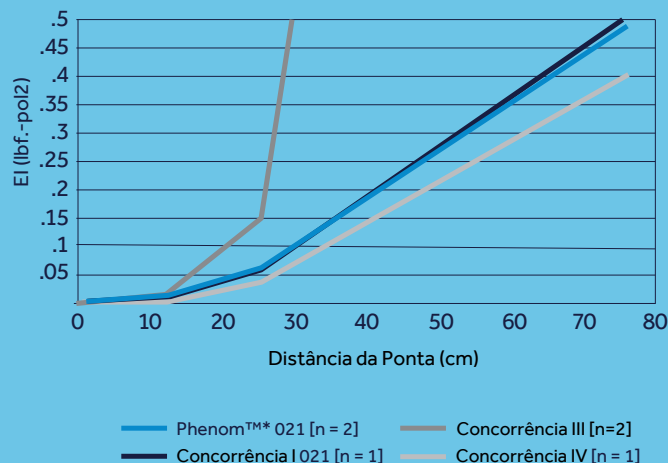


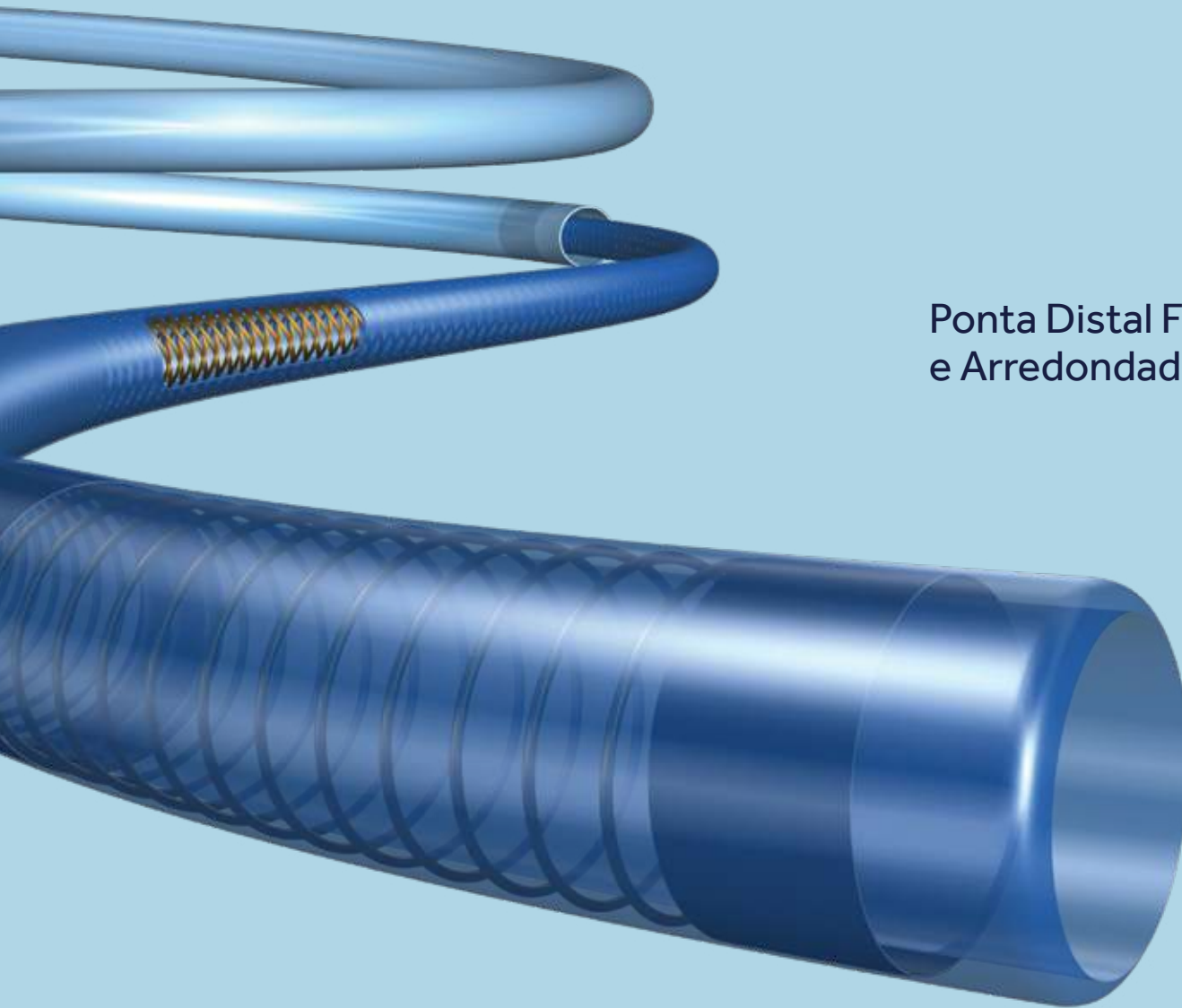

Ponta Distal Flexível
e Arredondada¹

Reforço da Ponta do 027³


Força de Curvatura da Ponta Distal Medida (g)
Comparação do Phenom™* 027³

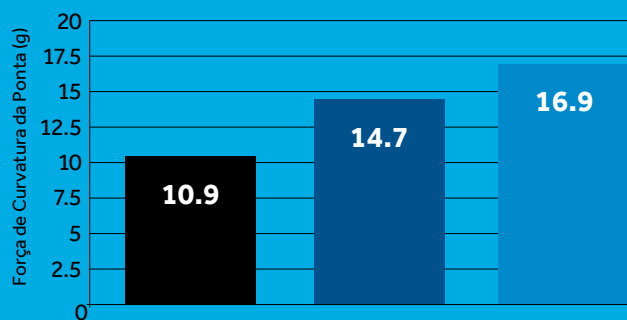

— Cateter Concorrência II [n = 2] — Cateter Marksman™ [n = 2]
— Cateter Phenom™* 027 [n = 2]


Força de Tração do 045²

Força de Navegabilidade Medida (N)²
Comparação do Cateter Phenom™* 045 Plu

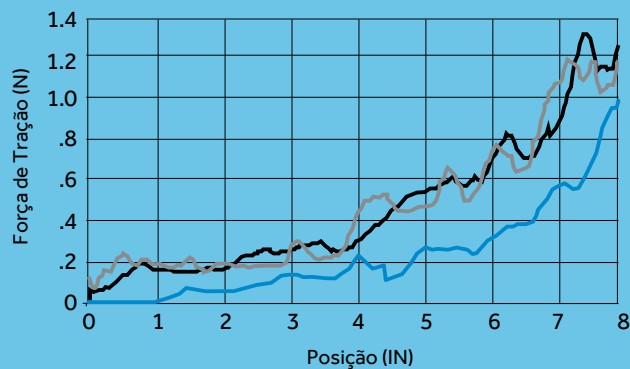

— Cateter Concorrência V [n = 1] — Cateter Concorrência VI [n = 1]
— Cateter Phenom™* Plus 045 [n = 1]

ESPECIFICAÇÕES PARA PEDIDOS

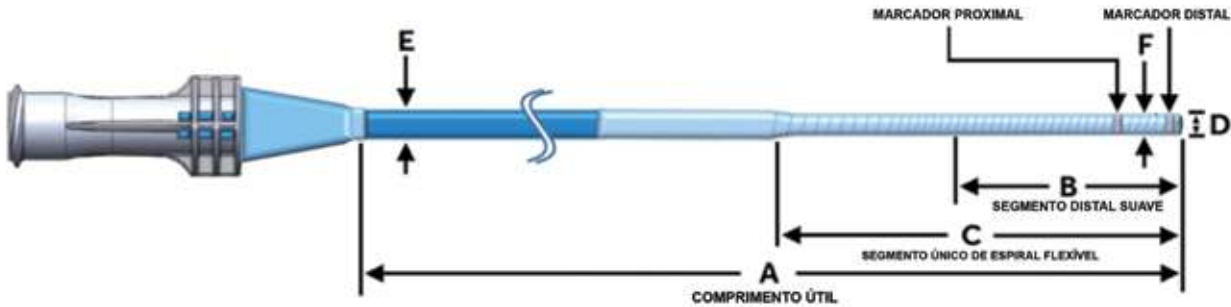

EXPLICAÇÃO DA REFERÊNCIA										
	Cateter Phenom™*	FG	Tamanho	A	-	B	C	-	Marcadores da Ponta	Formato da Ponta
Exemplo	CateterPhenom™* 017	FG	11	150	-	06	15	-	2	S

Diferentes cenários clínicos exigem variações nos níveis de suporte e navegação. Com os cateteres Phenom™*, oferecemos diversas especificações de cateter para suprir suas necessidades. Selecione o cateter adequado para a sua necessidade de entrega:

CATETER PHENOM™* 017 E 021 SELECIONE O FORMATO DA PONTA					
	D: ID do Cateter	E: OD Proximal	F: OD Distal	Formato da Ponta	Referência
Cateter Phenom™* 017	0,017" (0,43mm)	0,029" (2,2F)	0,024" (1,8F)	Reto	FG11150-0615-2S
				Curva em J	FG11150-0615-2J
				Curva 45	FG11150-0615-2X
				Curva 90	FG11150-0615-2R
Cateter Phenom™* 021	0,021" (0,53 mm)	0,034" (2,6F)	0,030" (2,3F)	Reto	FG13150-0615-2S
				45 Graus	FG13150-0615-2X
				90 Graus	FG13150-0615-2R
				Formato em J	FG13150-0615-2J

CATETER PHENOM™* 027: SELECIONE O COMPRIMENTO DA PONTA FLEXÍVEL					
	D: ID do Cateter	E: OD Proximal	F: OD Distal	C: Comprimento da Ponta Flexível	Número do Item
Cateter Phenom™* 027	0,027" (0,69mm)	0,040" (3,1F)	0,036" (2,8F)	15cm	FG15150-0615-1S
				30cm	FG15150-0630-1S

CATETER PHENOM™* PLUS SELECIONE O COMPRIMENTO ÚTIL					
	D: ID do Cateter	E: OD Proximal	F: OD Distal	A: Comprimento Útil	Número do Item
Cateter Phenom™* Plus	0,0445" (1,13mm)	0,061" (4,7F)	0,055" (4,2F)	105cm	FG19105-0630-1S
				120cm	FG19120-1030-1S

REFERÊNCIAS

1. Documento da Cathera ML-0001.A 2. TR-NV12653A 3. TR-NV12653A1

POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES: Consulte as Instruções de Uso para obter uma lista completa das advertências, precauções e contraindicações. As indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas no rótulo do produto fornecido com cada dispositivo.

Os Cateteres Phenom™* são indicados para a introdução de dispositivos intervencionais e a infusão de agentes diagnósticos ou terapêuticos nas vasculaturas neurológicas, periféricas e coronárias. ™* Phenom é uma marca comercial da Cathera, Inc. As marcas de terceiros são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.

Registro ANVISA: Microcateter Phenom - 10349000978