

FirstChoice™

CATETER-BALÃO PTA DE ULTRA ALTA PRESSÃO

CONSTRUÍDO PARA FÍSTULAS DE DIÁLISE ARTERIOVENOSA

A maioria das estenoses relacionadas ao acesso dialítico está localizada no sistema venoso, onde a anatomia é tortuosa e complexa. O FirstChoice™ facilita o tratamento de lesões obstrutivas localizados no sistema arteriovenoso de pacientes em diálise. É construído sobre uma **PLATAFORMA OVER-THE-WIRE** de **0,035"** com **RBP de até 27 atm** e um **SHAFT DE 75 CM**.

Pressão Nominal e de Ruptura

14 - 27 atm para dilatar lesões resistentes

Marcas Radiopacas

Facilitam o posicionamento preciso do balão

Balão de Nylon Semi-complacente

Promove a conformabilidade ao vaso e resiste ao seu estreitamento


Parede do Vaso

*Indicado para uso em angioplastia transluminal percutânea das artérias femoral, ilíaca e renal, e para o tratamento de lesões obstrutivas de fístulas arteriovenosas nativas ou sintéticas de diálise.

Fotografia real ampliada para mostrar detalhes

Ampla faixa de diâmetros do balão


5 mm - 16 mm

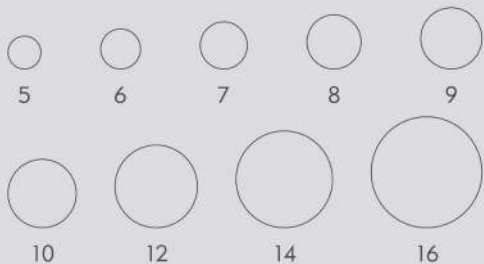

Cateter Coaxial

Suporta rápida insuflação, desinsuflação, navegabilidade e empurre

Lúmen de Insuflação

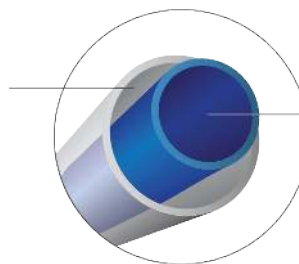

Lúmen do fio guia



Ferramenta de redobra

Ferramenta de redobra pré-instalada


Facilita a reinserção através da bainha

O balão de alta pressão FirstChoice™ foi projetado para dilatar lesões resistentes enquanto se conforma ao vaso, como demonstrado no estudo de caso abaixo.**

Estenose justa-anastomótica grave

- Homem, 66 anos com DRT, CAD, DPOC
- L RC AVF com canulação difícil, trombo presente
- Exame - aumento deficiente

FirstChoice 7x40 25 atm

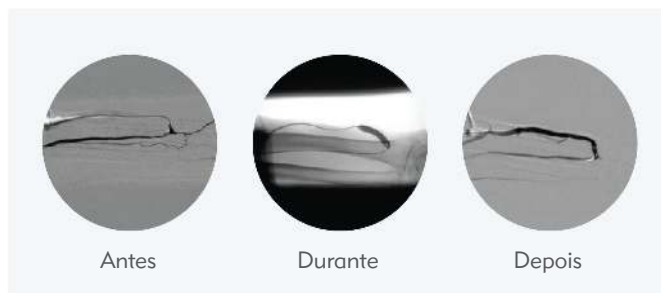

Antes

Durante

Depois

O FirstChoice™ faz parte da família Merit de Produtos de Acesso à Diálise: introdutores, fios-guia, dispositivos de insuflação, sistemas de laço, dispositivos de sutura e compressão. Visite Merit.com/Dialysis ou entre em contato com seu profissional de vendas da Merit para saber mais.

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

SISTEMA DE ENTREGA COM 75CM DE COMPRIMENTO, COMPATIBILIDADE COM FIO-GUIA 0.035"

Códigos	Descrição	Diâmetro	Comp.	Pressão Nominal	Pressão de Ruptura	Perfil da Bainha
UHP7554	5 mm x 4 cm	5 mm	40 mm	14 atm	27 atm	6F
UHP7564	6 mm x 4 cm	6 mm	40 mm	14 atm	25 atm	6F
UHP7574	7 mm x 4 cm	7 mm	40 mm	14 atm	25 atm	6F
UHP75710	7 mm x 10 cm	7 mm	100 mm	14 atm	23 atm	6F
UHP7584	8 mm x 4 cm	8 mm	40 mm	14 atm	24 atm	6F
UHP7588	8 mm x 8 cm	8 mm	80 mm	14 atm	22 atm	6F
UHP7594	9 mm x 4 cm	9 mm	40 mm	12 atm	20 atm	7F
UHP75104	10 mm x 4 cm	10 mm	40 mm	12 atm	20 atm	7F
UHP75124	12 mm x 4 cm	12 mm	40 mm	12 atm	18 atm	7F
UHP75144	14 mm x 4 cm	14 mm	40 mm	10 atm	16 atm	8F
UHP75164	16 mm x 4 cm	16 mm	40 mm	10 atm	14 atm	8F

Comprimento do Balão

40 mm - 100 mm



* Indicado para uso em angioplastia transluminal percutânea das artérias femoral, ilíaca e renal, e para o tratamento de lesões obstrutivas de fístulas arteriovenosas de diálise nativas ou sintéticas.

REGISTRO ANVISA: 80740959026

Fabricado por Creagh Medical Ltd. Dados em arquivo com o fabricante. Antes de usar consulte as instruções de uso para indicações, contraindicações, avisos, precauções e instruções de uso.



Understand. Innovate. Deliver.™

Sede

Rua do Paraíso, 148 - 10º andar
Sala 101 - Paraíso
CEP : 04103-000 - São Paulo - SP

Matriz

Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 10
Modulo E - Condomínio Perrini Business Park
CEP 89219-600 - Joinville - SC
Tel.: +55 47 3425-3720

Merit.com