

Sistema de Stent Carotídeo Protégé™ RX							
RETO				RETO			
Número do Produto	Diâmetro (mm)	Comprim. Stent (mm)	Tamanho do Lúmen (mm)	Número do Produto	Diâmetro (mm)	Comprim. Stent (mm)	Tamanho do Lúmen (mm)
SEPX-6-20-135	6	20	4,5 - 5,5	SEPX-9-40-135	9	40	7,5-8,5
SEPX-7-20-135	7	20	5,5 - 6,5	SEPX-10-40-135	10	40	8,5-9,5
SEPX-8-20-135	8	20	6,5 - 7,5	SEPX-6-60-135	6	60	4,5-5,5
SEPX-9-20-135	9	20	7,5 - 8,5	SEPX-7-60-135	7	60	5,5-6,5
SEPX-10-20-135	10	20	8,5 - 9,5	SEPX-8-60-135	8	60	6,5-7,5
SEPX-6-30-135	6	30	4,5 - 5,5	SEPX-9-60-135	9	60	7,5-8,5
SEPX-7-30-135	7	30	5,5 - 6,5	SEPX-10-60-135	10	60	8,5-9,5
SEPX-8-30-135	8	30	6,5 - 7,5	AFUNILADO			
SEPX-9-30-135	9	30	7,5 - 8,5				
SEPX-10-30-135	10	30	8,5 - 9,5	SEPX-8-6-30-135	8/6	30	(6,5 - 7,5) - (4,5 - 5,5)
SEPX-6-40-135	6	40	4,5 - 5,5	SEPX-8-6-40-135	8/6	40	(6,5 - 7,5) - (4,5 - 5,5)
SEPX-7-40-135	7	40	5,5 - 6,5	SEPX-10-7-30-135	10/7	30	(8,5 - 9,5) - (5,5 - 6,5)
SEPX-8-40-135	8	40	6,5 - 7,5	SEPX-10-7-40-135	10/7	40	(8,5 - 9,5) - (5,5 - 6,5)

Comprimento do cateter de 135 / Perfil cruzado do stent de 0,078" / compatível com 6F.

Dispositivo de Proteção Embólica SpiderFX™							
COMPONENTE			FIO DE CAPTURA		PONTA DE FORNECIMENTO	PONTA DE RECUPERAÇÃO	CATETER GUIA/BAINHA
Número do Produto	Tamanho Filtro (mm)	Tamanho do Lúmen (mm)	Comprim. do fio OTW/RX (cm)	Diâmetro do fio (pol/mm)	Perfil Cruzado (F)	Diâmetro (F)	DI Mínimo (pol)
SPD2-030-190	3,0	2,0-3,0	190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-030-320	3,0	2,0-3,0	320/190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-040-190	4,0	3,1-4,0	190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-040-320	4,0	3,1-4,0	320/190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-050-190	5,0	4,1-5,0	190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-050-320	5,0	4,1-5,0	320/190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-060-190	6,0	4,5-6,0	190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-060-320	6,0	4,5-6,0	320/190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-070-190	7,0	5,5-7,0	190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066
SPD2-070-320	7,0	5,5-7,0	320/190	0,014/0,36	3,2	4,2	0,066


Indicações do Sistema de Stent na Carótida Protégé™ RX:
Periférico
O stent é indicado para uso em oclusões, lesões de alto risco de fechamento abrupto ou fechamento de risco após angioplastia transluminal percutânea (PTA) ou lesões consideradas como de alto risco para nova estenose após PTA nas artérias ilíaca comum ou subclaviana. A colocação do stent é destinada a melhorar e manter o diâmetro luminal da artéria.
Carótida
O stent é indicado para o tratamento de estenoses da artéria carótida comum (CCA), artéria carótida interna (ICA) e bifurcação de carótida.
Indicações do Dispositivo de Proteção Embólica SpiderFX™:
O dispositivo de proteção embólica SpiderFX™ proporciona proteção de embolização distal durante o uso vascular, incluindo intervenções nos vasos periféricos, coronárias e carótidas.



COVIDIEN, COVIDIEN com logo, logo da Covidien e *positive results for life* são marcas comerciais registradas nos EUA e internacionalmente da Covidien AG. Outras marcas são marcas comerciais de uma empresa da Covidien. © 2013 Covidien. Reg. nº 80301610018 e 80301610030. M.Luz 06/2013.



Confiança
Visível.

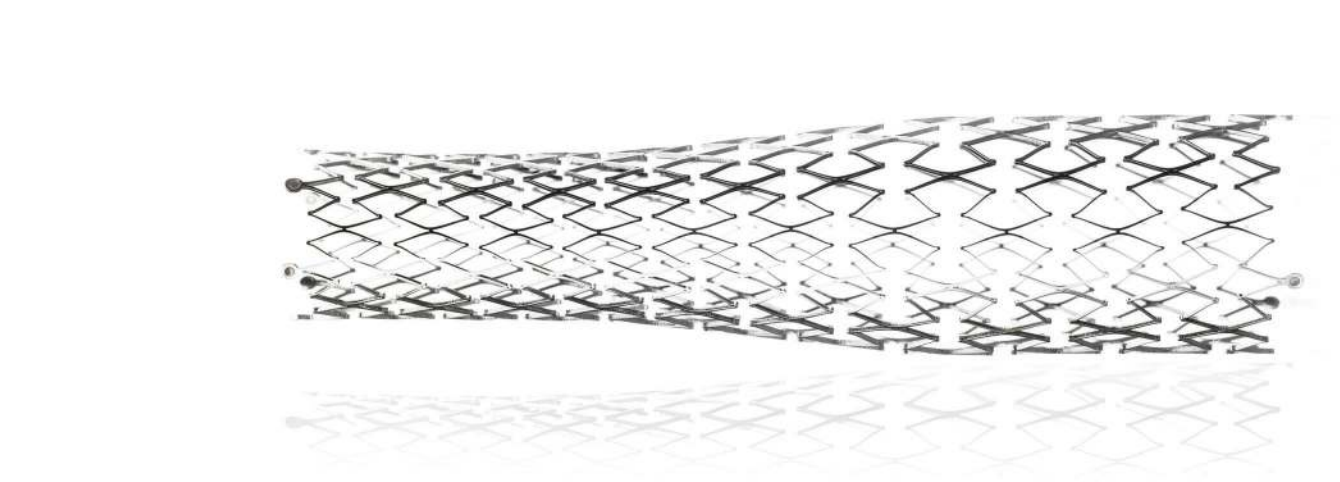

Soluções em Carótidas.



Sistema de Stent Carotídeo Protégé™ RX
Dispositivo de Proteção Embólica SpiderFX™


Liberação Previsível. Resultados Visíveis.

Sistema de Stent Carótideo Protégé™ RX

Projetado para Confiança na Colocação de Stent na Artéria Carótida.

Liberação Previsível

- O sistema de liberação EX.P.R.T.™ mantém o stent fixo no local para impedir a sua ativação prematura ou “salto”;
- Encurtamento mínimo do stent;
- Stent exclusivo projetado com afunilamento anatômico para se ajustar melhor à bifurcação da carótida;
- Cateter de troca rápida de 0,014” com baixo perfil de cruzamento 6F e ponta atraumática flexível;
- Marcador radiopaco no cateter indica claramente a localização afunilada para o posicionamento preciso.

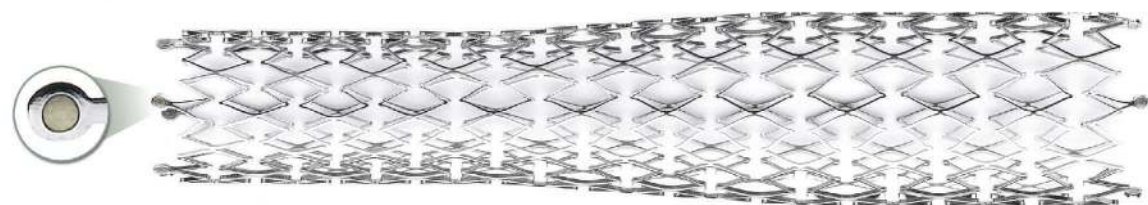

- Marcadores de tântalo GPS™ aumentam a visibilidade para posicionamento preciso e confirmação do resultado;
- O design da célula produz força expansiva que resiste à compressão, proporcionando ao mesmo tempo excelente aposição à parede;
- Opções reta e afunilada para encaixe personalizado nos vasos da carótida.

Captura Seleccionada.

Dispositivo de Proteção Embólica SpiderFX™

Fio Guia de Escolha

- Funciona com qualquer fio guia de 0,014” e 0,018” para atravessar as lesões carotídeas mais difíceis.


Portfólio Extenso

- Trata vasos de 2 a 7 mm com uma variedade de tamanhos; disponível para intervenções na carótida; também disponível para intervenções nas coronárias e de vasos periféricos.



Estabilidade do Filtro

- Posicionamento do filtro controlado durante toda a intervenção e durante as trocas:
- Design de nitinol trançado oferece completa aposição na parede;
- Fio de captura projetado para girar e se mover longitudinalmente independente do filtro.

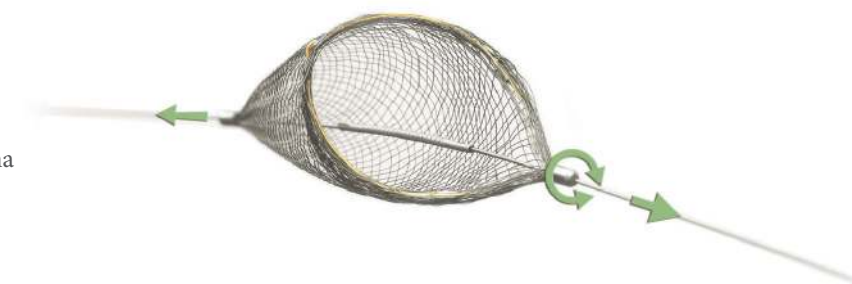

Visibilidade Melhorada

- Marcadores radiopacos claramente visíveis e indicador direto na ponta possibilita posicionamento rápido e controlado do filtro durante toda a intervenção.

