

A solução mais abrangente, projetada para acesso radial.

O Sistema de Acesso Radial Rist™ conta com o primeiro cateter guia, projetado para as demandas únicas de acesso à neurovasculatura pela via radial.

1,3,10,11,18

MedEd

Treinamentos e Workshops

Treinamento e suporte focados em radial, estruturados especificamente para neurointervencionistas.

Rist™ 071
Cateter-guia

Axium™
Família de Micromolas Destacáveis

Rist™ 071
Cateter-guia

Pipeline™
Dispositivos de Embolização Pipeline Flex Shield e Vantage com Tecnologia Shield

Rist™ 079
Cateter-guia

Referências

1. INC TR-12549
2. D00375759
3. INC TR-12736; TR-14609
4. INC-11815
5. Costa, Francesco et al. Ultrassom da Arteria Radial dentro da Catherização. Circ Cardiovasc Interv. 2016; 9:e003129 doi:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.115.003129
6. INC-11816
7. INC-11694
8. D00314259
9. D00312142
10. INC TR-13494
11. INC TR-13523
12. K203432
13. P100018/S026
14. K191551
15. D00615119
16. M020093CDOC2
17. K211990
18. INC TR-14569
19. INC-13676
20. D0050158
21. M009679CDOC2

Medtronic

Europe Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31 Case postale CH-1131

Consulte o manual do dispositivo para informações detalhadas sobre as instruções de uso, indicações, contraindicações, avisos, precauções e possíveis eventos adversos. Para mais informações, entre em contato com seu representante local da

Tolochenaz Tel: +41 0 21 802 70 00 Fax: +41 0 21 802 79 00 Medtronic e/ou consulte o site da Medtronic em medtronic.eu

medtronic.eu


Medtronic 2023. Medtronic, logo Medtronic e Engineering the Extraordinary são marcas registradas da Medtronic. ™ * Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa Medtronic.

UC202118536a-ris-radial-access-system-brochure-en-emea-10144350




Sistema de Acesso Radial Rist™

Confiança à mão.

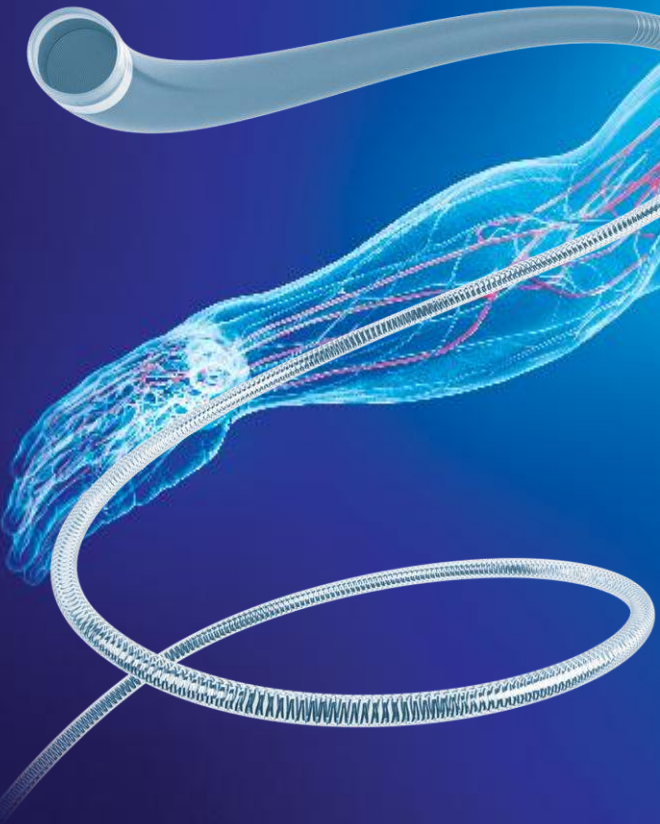

Zonas de transição onde você precisa

O™ cateter Rist Guide oferece navegabilidade distal e estabilidade proximal adaptadas à trajetória radial.

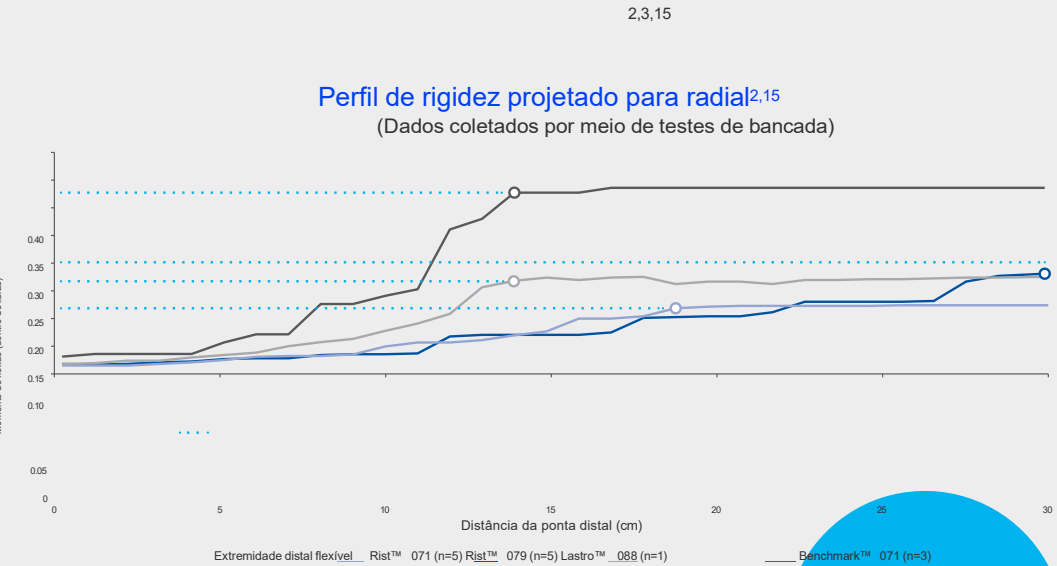

Seção distal mais longa que Benchmark™071

Rist™ 071
43% mais longa em comparação Seção flexível distal om Benchmark™ 071¹⁵
Rist™ 079
Seção flexível distal 2x mais longa em comparação com Benchmark™* 071


 **Ponta atraumática**
6 cm de coil arredondado de Nitinol

 **Zonas de transição gradual**
Transições graduais de material com Coil cruzado de fio plano de aço inoxidável^{4,19}

 **Zona distal flexível**
Navegabilidade distal otimizada.^{3,15}

 **Zona de suporte mais rígida**
Estabilidade onde é mais necessário^{2,3,15}


Navegar com confiança.

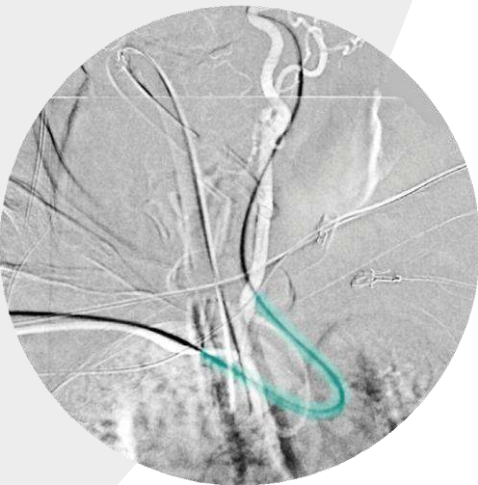

Faça a curva

O **Cateter Guia Rist** é projetado para navegar facilmente por curvas agudas e difíceis na via radial.³



Navegabilidade mais fácil com Rist™ ^{2,15}
(Dados coletados por meio de testes de bancada)

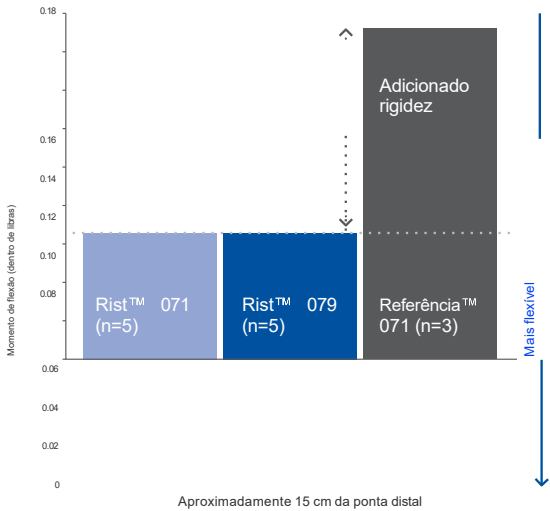

Alcance o topo

O **Cateter Guia Rist** é projetado de forma única para subir mais alto na ICA, fornecendo uma plataforma estável onde é mais necessário.³

Rist™ 071 oferece suavidade adicional nas pontas¹⁵
(Dados coletados por meio de testes de bancada)

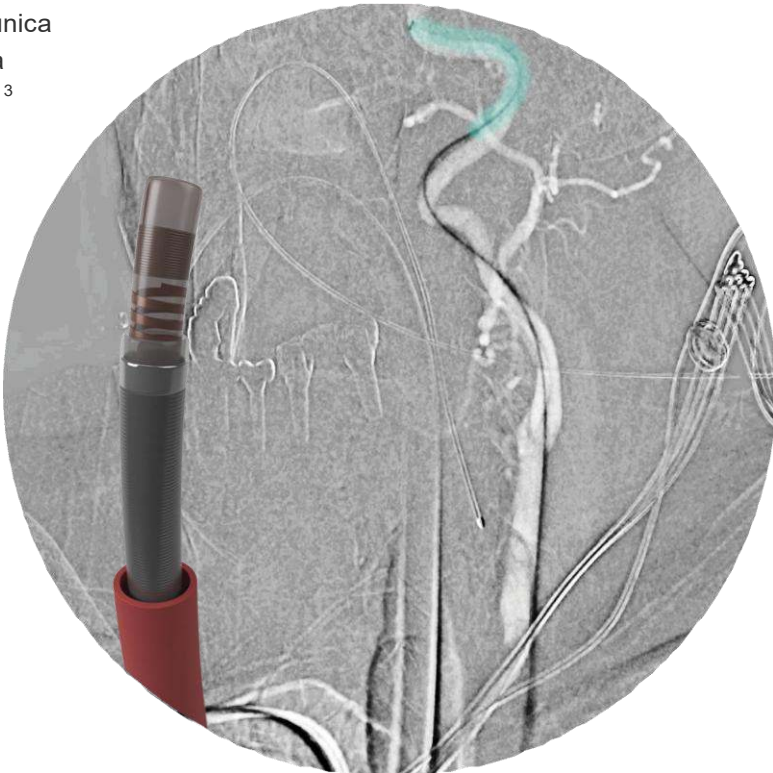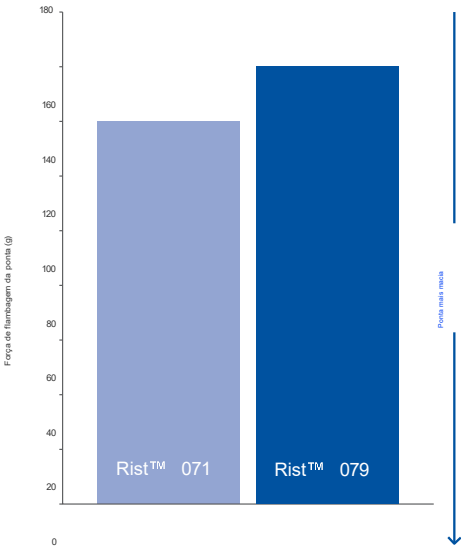

Não sacrifique Apoio

O **Cateter Guia Rist** possui diferentes opções de tamanho de lúmen, oferecendo flexibilidade para escolher o tamanho ideal conforme as necessidades procedimentais.

Cateter Guia Rist™ 071	
Especificações	Compatibilidade
6F OD	Compatível com as bainhas introdutoras 6F ¹⁶
0,071" de diâmetro externo	Compatível com cateteres 5,5F (0,070" OD) ou menores ¹⁶
Cateter Guia Rist™ 079	
Especificações	Compatibilidade
7F OD	Compatível com as bainhas introdutoras 7F ²¹
0,079" de DI.	Compatível com cateteres 6F ou menores ²¹



Rist™ 079
Catheter
7F OD,
0.079" ID

Disponível em 6F e 7F

O cateter seletivo de acesso radial Rist™

Projetado para uso com o cateter guia Rist™ 071 e 079 e otimizado para seleção de vasos.³

Número de Referência	Comprimento de Trabalho (cm)	OD (em / F)	ID (em)	Formas de Ponta
105F-BER-120	120	0,070 / 5,5F	0.040	Berenstein
105F-BER-130	130	0,070 / 5,5F	0.040	Berenstein
105F-SIM-120	120	0,070 / 5,5F	0.040	Sim2
105F-SIM-130	130	0,070 / 5,5F	0.040	Sim2

O™ cateter Rist Radial Access Guide

Primeiro, para fornecer zonas de transição específicas para raDiiafeis, antes opções de tamanho de lúmen, e uma faixa de comprimentos para desempenho ideal.³

Número de Referência	Comprimento de Trabalho (cm)	OD (em / F)	ID (em)	Comprimento do revestimento hidrofílico (cm)
106F-071-95	95	0,087 / 6F	0.071	25
106F-071-100	100	0,087 / 6F	0.071	25
106F-071-105	105	0,087 / 6F	0.071	25
107F-079-95	95	0,093 / 7F	0.079	25
107F-079-100	100	0,093 / 7F	0.079	25
107F-079-105	105	0,093 / 7F	0.079	25